


Salva Escaleras Yack

Movilidad Eléctrica



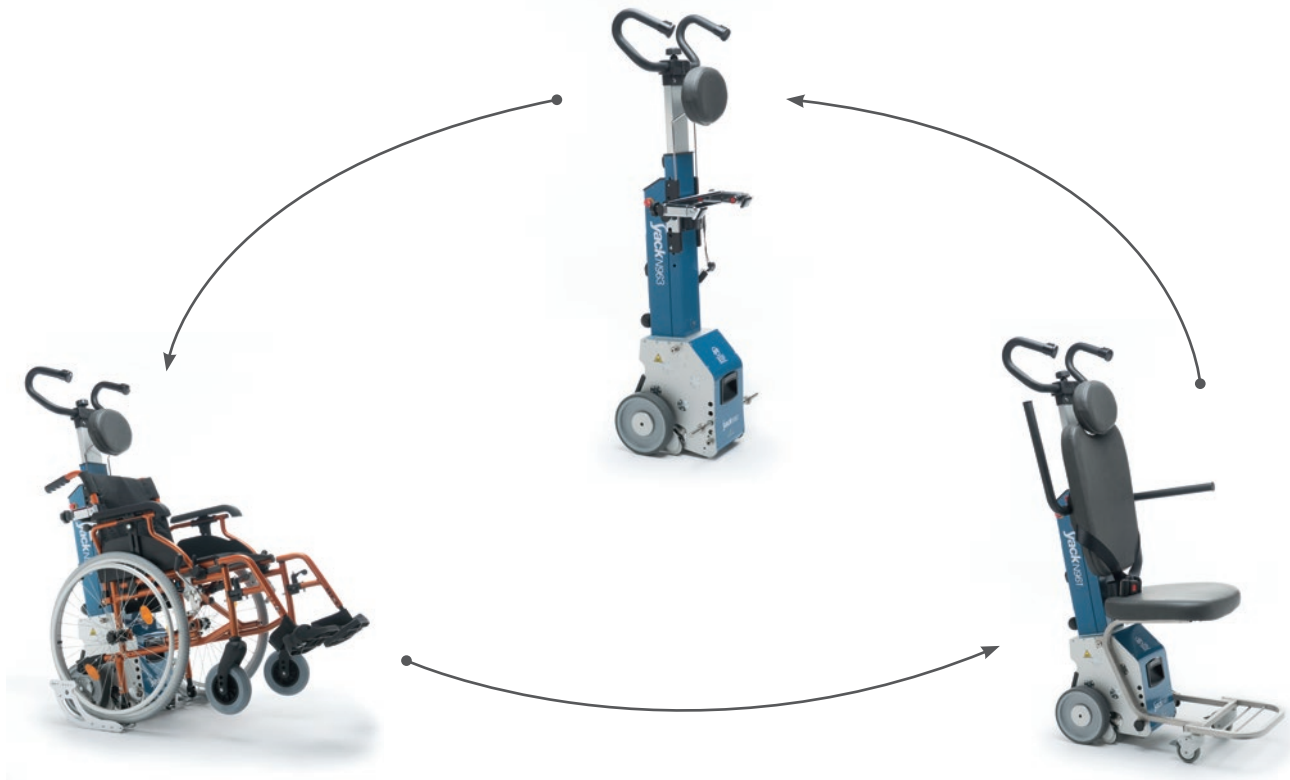

Salva Escaleras Yack

El Yack es el salva escaleras que permite subir y bajar escaleras rectas y de caracol. Se va adaptando a las necesidades del paciente, pasando del modo asiento (Yack 961) al modo silla de ruedas (Yack 962 / 963). Desmontable en diferentes secciones para facilitar su traslado. Con batería desmontable que permite su recarga sin mover todo el equipo.



Batería desmontable para facilitar la recarga.



Timón regulable en altura y ajustable para adaptarlo al cuidador.



Nuevo panel de control digital que permite introducir al cuidador diversos parámetros (velocidad, modo de subir las escaleras: individualmente/ciclo continuado...) garantizando un uso seguro y simple del sube escaleras.



Desmontable en diferentes secciones: mástil, columna y asiento (según modelo), lo que facilita su transporte.

En el Yack 961 los reposabrazos y reposapiés son abatibles para mayor confort del usuario.

Yack 961

El Yack 961 que incluye asiento, es el salva escaleras idóneo en una primera etapa. Cómodo, gracias sus reposabrazos abatibles y los reposapiés y reposacabezas regulables en altura.



Yack 962

La Yack 962 es la salva escalera para sillas de ruedas que permiten subir y bajar escaleras rectas y de caracol. Para un mejor ajuste de la silla de ruedas, cuenta con una barra de ajuste que permite fijar la silla al timón.



Yack 963

La Yack 963 es la salva escaleras para sillas de ruedas que permite subir y bajar escaleras rectas y de caracol. Permite adaptarlo a cualquier silla de ruedas, incluso a las pediátricas.

A diferencia de los equipos anteriores, el usuario puede transportar el salva escaleras Yack 963 en su propia silla de ruedas.



Descripción de producto	Referencia	Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	Peso total de la caja
Yack 961	04090029	123 x 62 x 50 cm	52 kg
Yack 962	04090030	123 x 62 x 50 cm	50 kg
Yack 963	04090031	123 x 62 x 50 cm	50 kg

Descripción de accesorios	Yack 961	Yack 962	Yack 963
Barra ajustable 46 – 60 cm	04090018	04090018	04090018
Barra ajustable 36 – 48 cm	04090005	04090005	04090005

Especificaciones técnicas	Yack 961	Yack 962	Yack 963
Dimensiones (largo x ancho x alto)	63 x 51 x 116 - 152 cm	50 x 60 - 68 x 116 - 152 cm	37 x 44 - 63 x 116 - 152 cm
Peso con baterías	43 kg	41 kg	37,2 kg
Peso máximo soportado	130 kg	130 kg	130 kg
Peso timón	7,1 kg	7,1 kg	7,1 kg
Peso de la base	23 kg	23 kg	23 kg
Peso de las baterías	4,5 kg	4,5 kg	4,5 kg
Peso del asiento con los reposapiés	5,1 kg		
Peso del respaldo	3,3 kg		
Tipo motor	220W – 24V (2500 rpm)	220W – 24V (2500 rpm)	220W – 24V (2500 rpm)
Altura máxima de escalón	21 cm	21 cm	21 cm
Anchura mínima del escalón	80 cm	90 cm	90 cm (dependiendo de la silla de ruedas)
Espacio mínimo de maniobra	70 x 70 cm	80 x 80 cm	80 x 80 cm (depende de la anchura de la silla de ruedas)
Velocidad	12 escalones/min.	12 escalones/min.	12 escalones/min.
Autonomía	500 escalones	500 escalones	500 escalones
Autonomía en reserva	20 escalones	20 escalones	20 escalones

Garantía			
Yack	2 años	2 años	2 años
Baterías	6 meses	6 meses	6 meses
Componentes electrónicos	1 año	1 año	1 año



Barra ajustable para el Yack 962 y Yack 963.

Apex Medical – Wellell Group

Elcano 9, 6ª planta
48008 Bilbao. Vizcaya. Spain
T +34 94 4706408
info@apexmedical.es



Wellell