




Cojín Conform

Superficie Especial de Manejo de Presión

APEX
Wellell Group


El cojín Conform es un concepto innovador que se adapta constantemente a los movimientos del usuario. Es ideal tanto para pacientes con riesgo alto de aparición de úlceras por presión (UPP), como para el tratamiento de UPPs hasta grado III.

Prevención UPPs

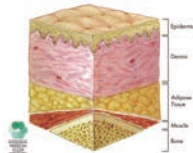


Riesgo alto


Tratamiento UPPs

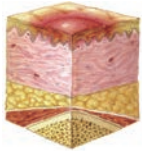

Grado I

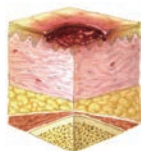

Grado II

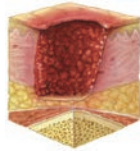

Grado III

El Conform es un cojín de aire estático compuesto por celdas interconectadas que permiten una óptima adaptación al paciente. Incluye una bomba de aire para hinchar el cojín a una presión suficiente, envolviendo al paciente y evitando que toque la base. Para una mayor eficacia terapéutica, el Conform cuenta con una placa canceladora para eliminar la presión en la zona de mayor riesgo.

Fabricado en una sola pieza de caucho natural que minimiza las roturas del mismo.

Este producto es eficaz terapéuticamente en:

- **Alivio de Presión:** Alto. Gracias a sus celdas interconectadas y la posibilidad de incorporar una placa canceladora de celdas.
- **Gestión del Microclima:** Media. La arquitectura de las celdas permite el paso de un flujo de aire entre las mismas, regulando la temperatura y la humedad. Fabricado en una sola pieza y en caucho natural.
- **Reducción de la Fricción:** Media. Incluye una funda de algodón y elastán.

APEX

Wellell Group

APEX MEDICAL, S.L.
 c/ Elcano, 9, 6ª planta
 48008 Bilbao (Vizcaya)
 Tel: 94.470.64.08
 info@apexmedical.es
 www.apexmedicalcorp.com

Descripción de Producto	Referencia
Conform (38 x 38 x 7,5 cm)	01160004
Conform (38 x 43 x 7,5 cm)	01160005
Conform (43 x 43 x 7,5 cm)	01160006
Conform (38 x 38 x 10 cm)	01160007
Conform (43 x 43 x 10 cm)	01160009
Descripción de accesorios:	
Placa canceladora de 4 celdas	01170002
Funda de incontinencia *bajo pedido*	01170004
Kit de reparación	01170005

Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto) y peso	Referencia
55,5 x 41,5 x 8,5 cm. 1,3 kg	01160004/01160005/ 01160006
55,5 x 41,5 x 11 cm. 1,55 kg	01160007/01160009

Especificaciones técnicas	
Celdas	Caucho natural anti alérgico
Funda	Algodón puro ignífugo (98%) y elastán (2%) Parte interior revestido con tejido anti deslizante
Presión de inflado máximo	20 – 30 mbar
Peso máximo soportado	160 kg
Garantía	2 años