



Mini Plus

Nebulizador Accionado por la Respiración Compresor Portátil

A diferencia del sistema de nebulizadores tradicionales, Mini Plus con vaso para nebulización "AllNeb" ofrece una tecnología accionada por la respiración del paciente, permitiendo una sincronización de la inspiración y la medicación, garantizando un tratamiento efectivo y seguro, evitando el desperdicio del medicamento.




Mini Plus

Nebulizador Accionado por la Respiración Compresor Portátil

Características ▼

- Vaso para nebulización "AllNeb" activado por la inspiración
- Partículas más finas menores a $4,8 \mu\text{m}$ (MMAD)
- Permite un excelente aprovechamiento de la dosis, la fracción respirable puede alcanzar el 96% del medicamento
- Compresor portátil, compacto, duradero y confiable

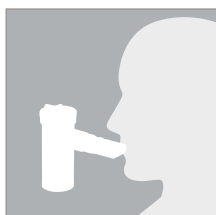

Nebulizador "AllNeb"
inspiro activado



Excelente aprovechamiento del
medicamento



Compresor portátil, compacto y
duradero



Cómodo diseño para
sujetar el vaso

Especificaciones

Modelo	Mini Plus	
Caraterísticas eléctricas	120 VAC, 60 Hz, 1.2 A	230 VAC, 50 Hz, 0.6 A
(Nota: Consultar la etiqueta de las características eléctricas en el producto)	230 VAC, 60 Hz, 0.6 A	
Presión máxima del compresor	≥ 35 psi	≥ 35 psi
Flujo de operación	Approx. 6.0 lpm	Approx. 5.5 lpm
Velocidad de Nebulización	0.2 ~ 0.3 ml / min	
Tamaño de la partícula	0.5 ~ 5 micras	
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	14.0 x 18.8 x 10.0 cm	
	5.5" x 7.4" x 3.9"	
Peso	1.6 kg / 3.5 lb	

Distribuido por:

Apex Medical Corp.

No. 9, Min Sheng St., Tu-Cheng,
New Taipei City, 23679, Taiwan

T +886 2 2268 5568

F +886 2 2268 6525

latinoamerica@apexmedicalcorp.com

www.apexmedicalcorp.com

Impreso 2021/05-500/Todos los derechos reservados

Las especificaciones podrían cambiar sin alguna
notificación

